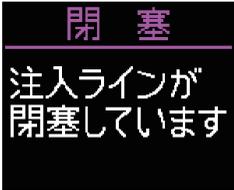
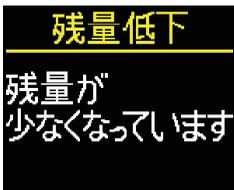
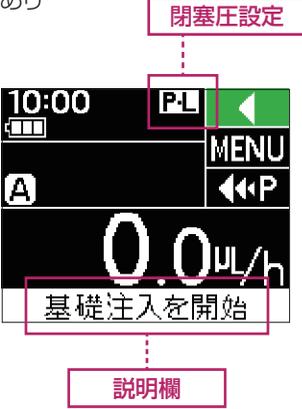
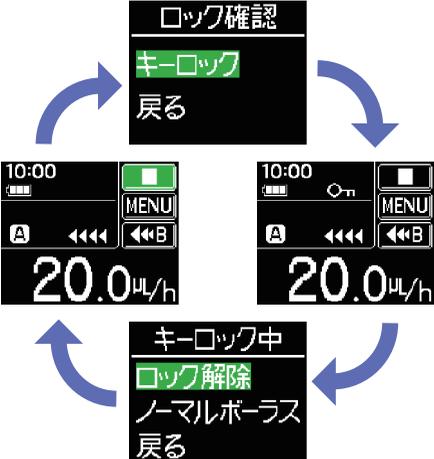
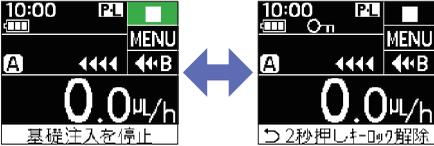


# TOP-8200RSへの仕様変更について

トレプロスト皮下投与療法で使用されるポンプが「型式番号TOP-8200R」から「型式番号TOP-8200RS」へ変更となるにあたり、知っておいていただきたい主な仕様変更項目についてご案内します。

変更項目と マニュアル* 該当ページ	従来のポンプ (TOP-8200R)	新規格のポンプ (TOP-8200RS)	説明
<p>警報分類と お知らせ方法</p> <p>マニュアル: P.56~61</p>	<p><b>従来の“警報”は“高優先警報”、“警告”は“低優先警報”に分類変更されました。</b></p> <p><b>警報</b></p> <p><b>名称と分類：警報</b></p> <p>閉塞 ドアオープン 電池切れ 内部故障 <b>操作忘れ</b></p> <p><b>音でのお知らせ：ビープ音</b></p> <p>ピー——… (電池切れのみ:ピー、ピー、…)</p> <p><b>画面のタイトルの色</b></p> <p>ピンク</p>  <p><b>動作インジケータ</b></p> <p>赤点滅 (内部故障のみ:赤点灯)</p>	<p><b>高優先警報</b></p> <p><b>名称と分類：高優先警報</b></p> <p>閉塞 ドアオープン 電池切れ 内部故障 <b>残量ゼロ</b></p> <p><b>音でのお知らせ：メロディ</b></p> <p>ピポパ-ピポ、ピポパ-ピポ、… (電池切れと内部故障のみ: ピポポ-ピポ、ピポポ-ピポ、…)</p> <p><b>画面のタイトルの色</b></p> <p>ピンク(変更なし)</p> <p><b>動作インジケータ</b></p> <p>赤点滅(変更なし)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>高優先警報に「残量ゼロ」が追加されました。</li> <li>ビープ音(短音)での警報音を廃止し、メロディ音となりました。</li> <li>「操作忘れ」が警報から低優先警報に分類変更されました。</li> <li>従来の「メンテナンス警告」は警報には分類せず画面上での通知のみとなりました。</li> <li>「警告」が「低優先警報」に分類変更されたことに伴い、画面タイトルの色と動作インジケータでのお知らせ方法も変更となりました。</li> </ul>
	<p><b>警告</b></p> <p><b>名称と分類：警告</b></p> <p>残量低下 電池電圧低下 <b>メンテナンス</b></p> <p><b>音でのお知らせ：ビープ音</b></p> <p>ピピピッ、…</p> <p><b>画面のタイトルの色</b></p> <p>ピンク</p> <p><b>動作インジケータ</b></p> <p>赤点滅</p>	<p><b>低優先警報</b></p> <p><b>名称と分類：低優先警報</b></p> <p>残量低下 電池電圧低下 <b>操作忘れ</b></p> <p><b>音でのお知らせ：メロディ</b></p> <p>ピポポ</p> <p><b>画面のタイトルの色</b></p> <p>黄</p>  <p><b>動作インジケータ</b></p> <p>消灯</p>	

変更項目とマニュアル* 該当ページ	従来のポンプ (TOP-8200R)	新規格のポンプ (TOP-8200RS)	説明
画面構成  マニュアル： 全体	<p><b>表示内容</b></p> <p>閉塞圧設定の表示なし 説明欄なし</p> 	<p><b>表示内容</b></p> <p>閉塞圧設定の表示あり 説明欄あり</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>メイン画面に閉塞圧設定が表示されるようになりました。</li> <li>閉塞圧設定は初期設定として「低」に設定されており、画面上では「P・L」と表示されます。</li> <li>アイコンに関する説明などが画面下部の説明欄に表示されるようになりました。</li> </ul>
キーロック  マニュアル： P.31 P.32 P.35 P.37	<p><b>キーロック方法</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>輸液中、無操作で30秒経過する</li> <li>輸液中、戻るキーを押し、キーロック確認画面を表示させ、キーロックを選ぶ</li> </ul> <p><b>解除方法</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>いずれかのキーを押しロック解除画面を表示させ、ロック解除を選ぶ</li> </ul> 	<p><b>キーロック方法</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>輸液中、無操作で30秒経過する</li> <li>輸液中、戻るキーを2秒押す</li> </ul> <p><b>解除方法</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>戻るキーを2秒押す</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>キーロック方法と解除方法が変更されました。</li> </ul>
入力状態  マニュアル： P.23 P.25 P.33 P.34	<p><b>表示方法</b></p> <p>選択枠を緑色で点滅</p>  	<p><b>表示方法</b></p> <p>選択枠をピンクで点滅</p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>入力状態が緑色の点滅からピンクの点滅に変更となりました。</li> </ul>